

zeta 5 power act

specific for aspirators

concentrated use at 1%

- > Bactericidal
- > Yeasticidal
- > Tuberculocidal
- > Limited Virucidal
(e.g. HIV, HBV, HCV, H5N1, H1N1)



1 L | disinfectant for medical devices | www.zhermack.com

Reorder N. **REF** C810040









Zhermack S.p.A. | via Bovazecchino, 100 | 45021 Badia Polesine (RO) Italy
T +39 0425 597 611 | www.zhermack.com

Last Update: 2017-04
0118073-22017-04

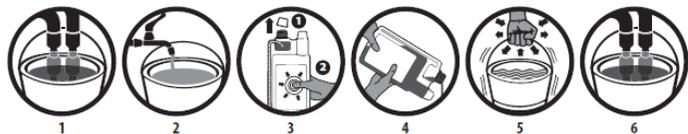

DE - GEBRAUCHSANLEITUNG: Desinfektionsmittel für Absauganlagen. Aldehyd- und phenolfreies Flüssigkonzentrat für die Desinfektion, Reinigung und Desodorierung von Absauganlagen und Mundspülbecken.

VERPACKUNGSEINHEIT: 1 Liter Flasche.

ZUSAMMENSETZUNG: 100 g Zeta 5 Power Act enthalten 5 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin, 4,2 g N,N-Didecyl-N-methyl-poly(oxyethyl)ammoniumpropionat, Tenside, Korrosionsinhibitoren, Additive, Hilfsstoffe und Wasser.

GEGENANZEIGEN: Keine Gegenanzeige bekannt.

WARNHINWEISE: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Bei Kontakt mit der Haut oder dem Haar die verschmutzte Kleidung sofort ausziehen und die Haut mit Wasser abwaschen. Bei Kontakt mit den Augen einige Minuten lang sorgfältig ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Bei andauernder Hautreizung einen Arzt aufsuchen. Nach Verschlucken den Mund ausspülen, kein Erbrechen hervorrufen und sofort ein Giftinformationszentrum oder einen Arzt konsultieren.

VORSICHTSMASSNAHMEN: Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz und Gesichtsschutz tragen. Nach der Handhabung Hände waschen. Gemäß den lokalen Vorschriften entsorgen. Das Produkt gut verschlossen an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung lagern. Das Ablaufdatum des Produkts gilt nur bei unversehrter Verpackung und richtiger Lagerung. Das Produkt muss bei einer Temperatur von höchstens 27°C aufbewahrt werden.

NEBENWIRKUNGEN: Es wurden keine Nebenwirkungen festgestellt.

SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG:

1. Die Absauganlage durchspülen, indem 2 Liter kaltes Wasser aufgesaugt werden (Abb. 1).
2. Mindestens einen Liter Lösung für jede Behandlungseinheit vorbereiten: einen Behälter mit Wasser füllen und dann 10 ml Zeta 5 Power Act pro Liter Wasser dosieren (Abb. 2, 3, 4).
3. Vermischen (Abb. 5). Die Lösung sieht opaleszent aus.
4. Die erhaltene Lösung durch die Absaugleitungen saugen (Abb. 6). Mindestens 250 - 300 ml Desinfektionslösung in das Mundspülbecken fließen lassen.
5. Für eine schnelle Desinfektion 15 Minuten einwirken lassen. Mindestens 4 Stunden (die ganze Nacht) einwirken lassen, um das in der Tabelle angegebene Wirkungsspektrum zu erreichen (inkl. tuberkulozid).
6. Nach der Einwirkzeit die Absauganlage durchspülen, indem 2 Liter kaltes Wasser aufgesaugt werden (Abb. 1). Der Vorgang muss mindestens am Ende eines jeden Arbeitstages durchgeführt werden und sollte vorzugsweise nach der ersten Tageshälfte und nach jedem besonders invasiven Eingriff wiederholt werden.

WIRKUNGSSPEKTRUM

Wirksamkeit (Mikroorganismen)	Bezugsnorm	Konzentration	Einwirkzeit (Minuten)
Bakterizid (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)	EN13727	1%	15
	EN14561	1%	15
Levurozid (C. albicans)	EN13624	1%	15
	EN14562	1%	15
Tuberkulozid (M. terrae)	EN14348	1%	240
Begrenzt viruzid gegen behüllte und lipophile Viren einschließlich hämatische Viren (HIV, HBV HCV), Herpes simplex und Virusfamilien, wie Orthomyxoviridae (einschließlich alle menschlichen und tierischen Grippeviren, wie H5N1 und H1N1), Filoviridae (Ebolavirus) und Paramyxoviridae (Masernvirus)	DVV/RKI	1%	1
	DVV (nicht poröse Oberflächen)	1%	60
	prEN16777	1%	60

WICHTIGE HINWEISE: Informationen jeder Art, auch während der Vorführungen, stellen keine Abweichung von der Gebrauchsanleitung dar. Der Anwender muss prüfen, ob das Produkt für die geplante Verwendung geeignet ist. Das Unternehmen haftet nicht für Schäden, auch nicht Dritter, die infolge der Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung oder ungeeigneter Verwendung entstanden sind, und nur im Rahmen des Werts der gelieferten Produkte.

NUR FÜR DEN GEWERBLICHEN GEBRAUCH.